


注射筆操作說明



筆型胰島素注射器比例示意圖

注射位置

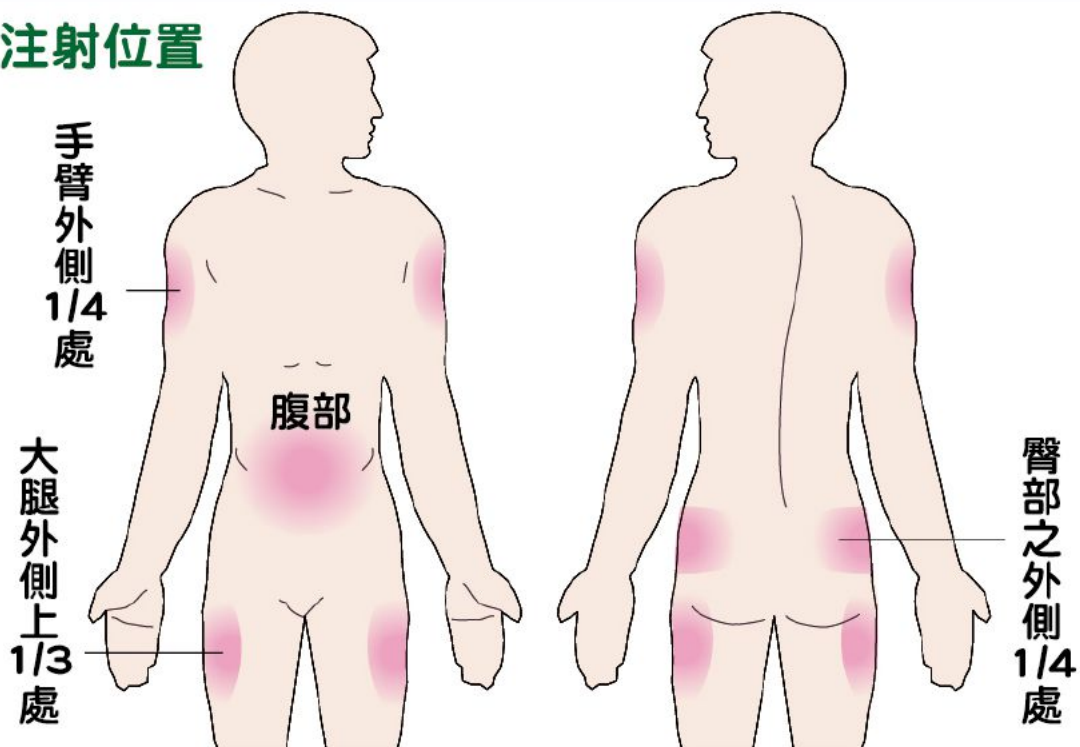

在執行胰島素注射前，請先確定下列項目已完成：

- * 用物準備：酒精棉片、胰島素筆針。
- * 確定注射部位（如果每日需注射三至四次，需輪替注射部位，避免在同一個部位重複注射）。
- * 依正確方式消毒注射部位。



注射操作說明



8 套上針頭外蓋，反方向轉下針頭，丟入醫療回收罐



1 用酒精棉片消毒橡膠處



2 拿掉塑膠蓋，撕開針頭封條



7 將針頭垂直插入皮膚，注射鈕壓到底，直到刻度歸零，並請停留10秒後再拔出針頭



3 垂直裝上針頭並鎖緊



6 轉動劑量選擇鈕到需注射的劑量位置(如：15單位)



5 拔去針頭內外蓋，針頭朝上，輕彈注射筆讓氣泡浮到頂端，選擇鈕按到底，排出注射液



4 轉動劑量選擇鈕到刻度2

諮詢專線：0800-395168

TW.GLU.13.01.01